



SMOOTHSKIN GOLD

GUÍA DEL USUARIO
GUIA DO UTILIZADOR
HANDLEIDING

powered by **ipulse**


NEDERLANDS

WELKOM BIJ SMOOTHSKIN GOLD

3.0
WERKING

3.1 HOE WERKT IPL?

SMOOTHSKIN GOLD is ontworpen om de haargroeycycli te helpen verbreken. Lichtenergie wordt via het huidoppervlak naar het melanine in de haarschacht overgedragen en door dat melanine geabsorbeerd. De geabsorbeerde lichtenergie wordt omgezet in warmte-energie (onder het huidoppervlak), dat de haarfollikel uitschakelt en verdere haargroei voorkomt. De behandelde haren vallen op natuurlijke wijze uit in de loop van enkele dagen tot 1-2 weken.

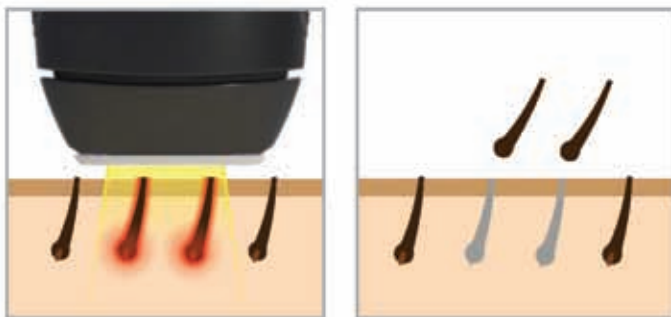

Haargroei volgt een cyclisch patroon en vindt plaats in 3 opeenvolgende fasen. IPL behandeling is alleen werkzaam wanneer het haar zich in een bepaalde fase bevindt (de anagene of groeifase). De haren zitten niet allemaal op hetzelfde moment in dezelfde fase. Daarom dient u het aanbevolen behandelingsvoorschrift van 12 wekelijkse behandelingen te volgen.

HAARKLEUR

De IPL behandeling werkt dankzij melanine in het haar dat de lichtenergie absorbeert. De behandeling is het meest effectief op donker haar. SMOOTHSKIN GOLD is niet effectief op zeer lichtblond, rood of grijs haar.

3.2 WAT U KUNT VERWACHTEN

ONMIDDELIJK NA DE BEHANDELING

U zou geen beduidende bijwerkingen van de behandeling moeten zien. (Raadpleeg deel 5.2 voor meer informatie over bijwerkingen.)

In de eerste paar weken na de eerste behandelingen zult u nog steeds enkele haren zien groeien. Dit zijn waarschijnlijk haren die tijdens de behandeling zijn gemist, doordat zij zich in een sluimerende toestand bevonden en niet in hun groeifase (Anagene), wanneer IPL het meest effectief is.

NA DE EERSTE 6 WEKEN VAN HET 12-WEEKSE PROGRAMMA

U zou nu moeten zien dat de haargroei is afgenomen. Waarschijnlijk zijn er echter nog veel haren die nog niet in hun groeifase behandeld zijn. Daarom is het belangrijk dat u de wekelijkse behandelingen voortzet.

NA HET 12-WEEKSE PROGRAMMA

Onmiddellijk nadat u het 12-weekse programma heeft afgerond, dient u te kunnen zien dat de haargroei in de behandelde zone aanzienlijk is verminderd. Eventuele resterende haren zouden fijner en lichter van kleur moeten zijn. Wij verwachten dat u uw huid permanent haarvrij zult kunnen houden door de behandelingen eenmaal per maand of wanneer u dat nodig acht te herhalen.

4.0 HET GEBRUIK

4.1 DE HUIDTEST

Wij ADVISEREN, **voorafgaand aan de eerste behandeling van een nieuwe zone van uw lichaam** uw huid in die zone te controleren op reacties op SMOOTHSKIN GOLD.

De zone voor de huidtest moet ongeveer 3cm x 2cm groot zijn (zo groot als twee flitsen op de huid, naast elkaar).

1. Volg de instructies in het onderdeel "Beginnen" om de zone voor te bereiden voor de huidtest.
2. De zone behandelen
3. **Wacht** na de huidtest **24 uur** om u er van te verzekeren dat uw huid geschikt is voor behandeling en er geen ongewenste reacties op de lichtenergie optreden.
4. Als er **na 24 uur** geen reactie is, kunt u de zone rond de huidtest behandelen. De zone waar de huidtest is uitgevoerd, **mag minstens 1 week NIET behandeld worden**.

4.2 BEGINNEN

1. VOORBEREIDING van de te behandelen zone

Zorg ervoor dat u het haar in de te behandelen zone NIET waxt, epileert of plukt, omdat dit de haarschacht verwijdert die tijdens de behandeling de lichtenergie absorbeert.



Voordat u SMOOTHSKIN GOLD gebruikt:

- Scheer alle zichtbare haren weg. Controleer of er nog haar op het huidoppervlak zit, want dit kan de verwijderbare voorzijde beschadigen.
- Reinig de te behandelen zone en dep deze droog.

2. Het apparaat AANSCHAKELEN

- Steek het snoer in de onderzijde van de handset.
- Steek de stekker in het stopcontact. Het BLAUWE lampje in de Standby/Gereed toets brandt om de STANDBY Modus aan te duiden. In deze modus kan het apparaat niet flitsen.
- Druk eenmaal op de Standby/Gereed toets; het lampje wisselt van BLAUW naar WIT om aan te duiden dat de handset gereed is voor gebruik.

STANDBY MODUS Timeout

Wanneer het apparaat "inactief" is, d.w.z. er wordt gedurende 3 minuten geen toets ingedrukt, dan schakelt het apparaat terug naar de STANDBY modus. Dit wordt aangeduid doordat de Standby/Gereed toets BLAUW is verlicht. Druk eenmaal op de toets om terug te keren naar de GEREED modus voor behandeling.

4.3 FEATURES

1. INTELLIGENTE HUIDSENSOREN

Detect & Set™

SMOOTHSKIN GOLD heeft 2 unieke geavanceerde Skin Tone sensoren, die zich aan beide zijden van het behandelingsvenster bevinden.

Tijdens de behandeling zijn de sensoren voortdurend actief op zoek naar een **geschikte** huidteint.

Als geen geschikte huidteint wordt gedetecteerd door allebei Skin Tone sensoren, kan de handset niet worden geactiveerd.

De handset detecteert uitsluitend een geschikte huidteint wanneer beide Skin Tone sensoren (aan weerszijden van het behandelingsvenster) tegen de huid worden aangedrukt.



De status van de Skin Tone sensoren kan worden afgelezen van de lichtbalken aan beide zijden van de handset. Indien een geschikte huidteint wordt gedetecteerd, zijn de lichtbalken **WIT VERLICHT**. Het aantal verlichte lampjes is afhankelijk van uw exacte huidteint.

De optimale energiestanden zijn zorgvuldig geselecteerd om maximale veiligheid en werkzaamheid te verzekeren. Dit unieke feature zorgt ervoor dat u iedere keer dat u SMOOTHSKIN GOLD gebruikt, een **GEPERSONALISEERDE** behandeling krijgt.

MINDER LAMPJES = Een donkerdere huid en lagere energiestand


MEER LAMPJES = Een lichtere huid en hogere energiestand



2. ZACHTE MODUS

Als u de behandeling onprettig of iets te pijnlijk vindt, kunt u de toets voor de 'zachte modus' indrukken om het vermogen te verlagen.

- Druk eenmaal op de toets voor de ZACHTE modus; het WITTE lampje gaat nu branden om aan te duiden dat deze modus geactiveerd is. U zult minder indicatorlampjes in de lichtbalk zien branden wanneer u het apparaat tegen uw huid houdt.
- Om de ZACHTE modus te deactiveren, drukt u nogmaals op de toets. Het lichtje in deze toets gaat dan uit en het apparaat keert terug naar de standaard energiestand.

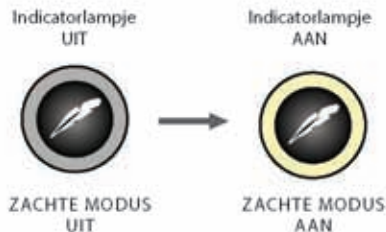


Het gebruik van de ZACHTE modus kan de werkzaamheid van het systeem verminderen en er zullen wellicht meer behandelingen nodig zijn om het gewenste effect te bereiken.

4.4 BEHANDELING

- Druk de handset stevig tegen de te behandelen zone. Controleer of de lichtbalken aanduiden dat de huidteint geschikt is.
- De activatietoets indrukken. Het apparaat zal flitsen en er zou iets warmts moeten voelen.
- Verplaats de handset naar de volgende te behandelen zone en herhaal de handeling.

Zorg ervoor dat de **GEHELE ZONE** behandeld wordt, maar behandel eenzelfde zone **GEEN** tweede maal (overlappen van flitsen).

BEHANDELINGSVENSTER

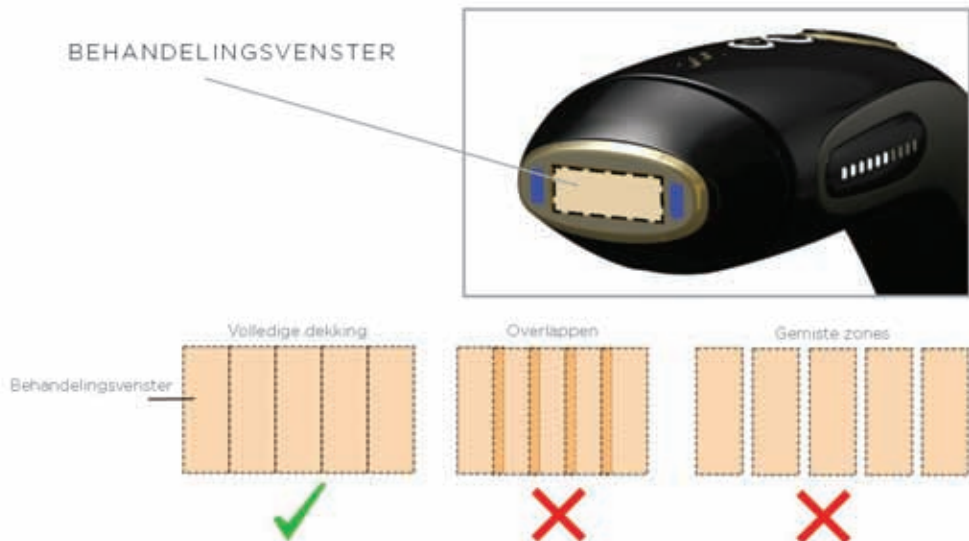

4.5 BEHANDELINGSMETHODE – STEMPELEN OF SCHUIVEN

Er bestaan twee verschillende methoden die worden aanbevolen voor behandelingen – 'Stempelen' en 'Schuiven'.

Welke methode u ook kiest, de handset moet tussen de flitsen in worden verplaatst om ervoor te zorgen dat dezelfde zone niet tweemaal wordt behandeld.

STEMPELMETHODE

Deze methode wordt aanbevolen voor de kleinere zones, zoals de oksels en het gezicht. Plaats de handset op de huid en druk de activatietoets in en uit. Verwijder de handset van de huid en plaats hem zorgvuldig op de volgende te behandelen zone.

SCHUIFMETHODE

Deze methode wordt aanbevolen voor de grotere zones, zoals de benen. Plaats de handset op de huid, houd de activatietoets ingedrukt (voortdurend indrukken) en schuif vervolgens de handset tussen de flitsen door over de huid. Probeer de handset bij een constante snelheid zodanig te verschuiven, dat het gehele gebied eenmaal wordt behandeld zonder overlappingen of overgeslagen zones.

Het apparaat moet tussen de flitsen door worden opgeladen. Dit duurt 1 tot 2 seconden. Tijdens het opladen is de Standby/Gereed toets WIT verlicht en kan het lampje niet flitsen.

4.6 BEHANDELINGSSCHEMA

Voor een optimaal resultaat moet SMOOTHSKIN GOLD 12 weken lang iedere week worden gebruikt om ervoor te zorgen dat alle haarfollikels worden behandeld.

Na de initiële behandelingsfase (12 wekelijkse behandelingen) bevelen wij aan, dat SMOOTHSKIN GOLD tenminste eenmaal per maand wordt gebruikt of telkens als u dat nodig acht, om het resultaat te handhaven.

Bezoek de SMOOTHSKIN website voor verdere informatie en handige tips over het gebruik en hoe het beste resultaat te bereiken met uw SMOOTHSKIN GOLD.

4.7 UITSCHAKELLEN

Wanneer de behandeling met de SMOOTHSKIN GOLD is voltooid, dient de stekker uit het stopcontact te worden gehaald.

Raadpleeg deel **5.3** voor informatie over het verzorgen van de SMOOTHSKIN GOLD.

5.0

NAZORG

5.1 EVENTUELE BIJWERKINGEN

SMOOTHSKIN GOLD is een krachtig apparaat. Bij sommige mensen kunnen tijdens het gebruik lichte ongemakken (bijv. warmte of roodheid van de huid) voorkomen – dit is normaal. Bij gebruik van het apparaat kunt u een warm gevoel of een tinteling voelen, gevolgd door roodheid op de huid. Dit soort reactie verdwijnt gewoonlijk binnen 24 uur.

Bijwerkingen of reacties treden gewoonlijk onmiddellijk of binnen 24 uur na de behandeling op.

Als u bezorgd bent, stop dan met het gebruik van SMOOTHSKIN GOLD en neem contact op met de iPulse Helpline op **+31 (0) 20 262 1994**.

5.2 BIJWERKINGEN

BIJWERKINGEN	EVALUATIE EN WAT U DIENT TE DOEN
Lichte pijn/ongemak in de te behandelen zone	Dit is te verwachten en is normaal voor alle IPL behandelingen. U kunt het apparaat blijven gebruiken volgens de instructies; de pijn zou moeten verminderen bij voortgezet gebruik.
Een warm gevoel of tintelingen tijdens de behandeling, die meestal na een paar seconden tot een minuut verdwijnen en afnemen bij voortgezet gebruik.	Dit is te verwachten en is normaal voor alle IPL behandelingen. U kunt het apparaat blijven gebruiken volgens de instructies.
Jeuk in de te behandelen zone.	Dit is vrij normaal voor IPL behandelingen; het zou na een korte periode moeten afnemen. U kunt het apparaat blijven gebruiken volgens de instructies. De zone niet openkrabben.
Roodheid van de huid tijdens of na de behandeling; deze verdwijnt binnen enkele minuten	Dit is te verwachten en is normaal bij IPL behandelingen. Nadat de roodheid is verdwenen, kunt u het apparaat blijven gebruiken volgens de instructies.

Roodheid van de huid die niet binnen minuten verdwijnt en langer aanhoudt dan 24-48 uur.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts alvorens het opnieuw te gebruiken.
Pijn of ongemak die intens is tijdens de behandeling of aanhoudt na een behandeling.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts alvorens het opnieuw te gebruiken.
IN ZEER ZELDZAME GEVALLEN	EVALUATIE EN WAT U DIENT TE DOEN
Zwelling en roodheid die niet binnen twee tot drie dagen verdwijnt .	Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts alvorens het opnieuw te gebruiken. Neem contact op met de SMOOTHSKIN Helpline op +31 (0) 20 262 1994 .
Tijdelijke verkleuringen van de huid (lichter of donkerder).	Indien uw huidskleur verandert, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts. Neem contact op met de SMOOTHSKIN Helpline op +31 (0) 20 262 1994 .
Blaarvorming of verbranding van de huid.	Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw arts alvorens het opnieuw te gebruiken. Houd een cold pack tegen de zone. Behandelen met antiseptische crème of een crème tegen brandwonden. Neem contact op met de SMOOTHSKIN Helpline op +31 (0) 20 262 1994 .

5.3 REINIGING, ONDERHOUD EN BEWARING

1. Schakel de SMOOTHSKIN GOLD na de behandeling altijd uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
2. Na gebruik moeten de handset, de Skin Tone sensoren en het behandelingsvenster worden gecontroleerd op schade en worden afgenomen met een droge, pluisvrije doek.

WAARSCHUWING: Het glazen filter kan tijdens de behandeling heet worden. Laat het filter na gebruik gedurende 5 minuten AFKOELEN voordat u het aanraakt of schoonmaakt.

GEBRUIK nooit water of andere reinigingsmiddelen; deze kunnen het apparaat beschadigen en een gevaar voor de veiligheid vormen.

Voor een maximale prestatie van uw SMOOTHSKIN GOLD is het bijzonder belangrijk de **verwijderbare voorzijde en de reflector** vrij van vuil, haar of andere restanten te houden.

Voor een gemakkelijke reiniging van dit onderdeel, kan de voorzijde van de handset worden verwijderd. Eenmaal verwijderd, kan deze met een licht vochtige doek worden gereinigd. Zorg er altijd voor dat de verwijderbare voorzijde **volledig droog** is alvorens deze weer op de handset terug te plaatsen.



Neem de zijkanten van de voorzijde vast en trek deze van de handset weg. Eenmaal gereinigd, terugplaatsen en controleren dat de voorzijde volledig is ingevoerd. De voorzijde kan maar op één manier worden ingevoerd. Niet forceren.

3. Bewaar SMOOTHSKIN GOLD op een koele droge plek. Zorg ervoor dat het behandelingsvenster en de Skin Tone sensoren op de handset beschermd zijn tegen eventuele schade.
4. Controleer het apparaat (inclusief het snoer) met regelmaat op zichtbare tekenen van beschadiging. In het geval van schade of barsten, stop het gebruik van het apparaat en laat het controleren en vervangen door de fabrikant – Neem contact op met de SMOOTHSKIN Helpline op **+31 (0) 20 262 1994**.

5.4 PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
De indicatorlampjes op de lichtbalk aan de zijkant van de handset branden niet wanneer de handset tegen de huid wordt geplaatst.	Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Controleer of de handset in de GEREED modus staat (druk eenmaal op de STANDBY/GEREED toets). Controleer of beide huidsensoren (aan weerszijden van het behandelingsvenster) tegen de huid zijn gedrukt.
Terwijl het apparaat tegen uw huid wordt gedrukt, is het eerste lampje van de lichtbalk aan de zijkant van de handset ROOD verlicht en werkt de SMOOTHSKIN niet.	De zone die u wilt behandelen is te donker voor behandeling. SMOOTHSKIN GOLD omvat intelligente Skin Tone sensoren die automatisch uw huidteint detecteren en de optimale instelling voor de behandeling selecteren. Wegens de aard van de Intense Pulsed Light technologie is SMOOTHSKIN GOLD niet geschikt voor iedereen en kan een zeer donkere huid er niet mee worden behandeld.
Het eerste lampje van de lichtbalk aan de zijkant van de handset flikkert voortdurend in ROOD en de SMOOTHSKIN GOLD werkt niet.	De verwijderbare voorzijde is niet aanwezig of onjuist aangebracht. Probeer de handset opnieuw aan te brengen.

PROBLEEM	OPLOSSING
Alle lampjes van de lichtbalk flikkeren voortdurend en de SMOOTHSKIN GOLD werkt niet.	De SMOOTHSKIN GOLD heeft 120.000 flitsen afgevuurd en is uitgewerkt (einde levensduur).
De lampjes op de lichtbalk aan de zijkant van de handset branden of flikkeren onregelmatig met inbegrip van een rood LED indicatorlampje.	SMOOTHSKIN GOLD geeft foutberichten weer door middel van combinaties van lampjes op de lichtbalken aan de zijkant van de handset. Dit wijst erop dat er een storing is aan het apparaat. Stop met het gebruik van het apparaat en bel de Helpline.
De SMOOTHSKIN handset, het behandelingsvenster, de stekker of het snoer zijn beschadigd, gebroken, gebarsten of lijken niet te werken.	NIET GEBRUIKEN. Indien u twijfels heeft over de veiligheid van SMOOTHSKIN GOLD, of denkt dat deze op enigerlei wijze is beschadigd, mag het apparaat niet gebruikt worden en dient u contact op te nemen met de Helpline.

6.0

INFORMATIE

6.1 TECHNISCHE SPECIFICATIES

SMOOTHSKIN GOLD is een gepulseerd lichtstelsel met gefilterde breedband; het heeft de volgende technische specificaties:

- Herhalingsfrequentie: iedere 1-2 seconden handmatig gepulseerd (afhankelijk van de instelling van de behandeling)
- Voortdurende werking
- Max. optisch rendement: 6J/cm²
- Pulselengte: 2.6msec FWHM
- Netsnoeringang: 100-240V~, 50/60Hz, 1.3-0.55A
- Bedrijfstemperatuur: tussen 5°C en 40°C
- Bedrijfsvochtigheid: tot 93%R.H. niet condenserend
- Bedrijfsdruk: 700hPa tot 1060hPa
- Behandelingszone: 3 cm² (30mm x 10mm)

Transportvoorwaarden:

- Temperatuur: -25°C to +70°C
- Vochtigheid: tot 93%R.H. niet condenserend
- Druk: 500hPa tot 1060hPa

SMOOTHSKIN GOLD telt 120.000 flitsen en is bedoeld voor een enkele gebruiker.

SMOOTHSKIN GOLD voldoet aan de standaarden IEC 60601-1-2:2007, EN55014-1:2006, EN55014-2:1997, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008 en IEC60335-2-23:2003 voor elektromagnetische (EMC) immuniteit en emissies.

6.2 VERWIJDERING (einde levensduur)

Om gevaren voor de gezondheid en het milieu te minimaliseren en ervoor te zorgen dat materialen kunnen worden gerecycled, moet dit product bij de gemeentelijke ophaaldienst worden ingeleverd als elektronisch afval.

Het rolcontainersymbool op het product is er om u hieraan te herinneren.

6.3 GARANTIE

Wij verlenen 2 jaar garantie op het product, met ingang van de dag van aankoop. Binnen de garantieperiode controleren wij het product gratis op fouten in de materialen of het vakmanschap en vervangen wij het apparaat indien wij dat nodig achten.

Deze garantie is geldig in ieder land waar dit apparaat door iPulse of een door iPulse aangewezen distributeur wordt geleverd.

Deze garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik, normale slijtage of gebruik, en ook geen defecten die een te verwaarlozen effect hebben op de waarde of werking van het toestel. De flitslamp wordt beschouwd als een slijtagegevoelig onderdeel van het apparaat en wordt om deze reden niet door deze garantie gedekt. De geldigheid van de garantie vervalt indien reparaties worden uitgevoerd door onbevoegde personen en indien er geen originele onderdelen van SMOOTHSKIN GOLD voor deze reparaties worden gebruikt.

Om service te verkrijgen binnen de garantieperiode, bezoekt u onze website:
www.smoothskin.co.uk/nl/

6.4 ONDERSTEUNING

U kunt SMOOTHSKIN op verschillende manieren bereiken. Als u onze Helpline niet tijdens kantooruren kunt bellen **+31 (0) 20 262 1994**, bieden wij online support.

U kunt ons bereiken via onze SMOOTHSKIN webpagina **www.smoothskin.co.uk/nl/**



CM12-1059-01